


**ИГЛА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ БИОПСИИ
ТИП ЧИБА ИЗ ЭХООТРАЖАЮЩЕЙ СТАЛИ**

ECOSHIVA®

ECHONOX®



Стилет из эхоотражающей стали позволяет видеть всю длину иглы на мониторе.

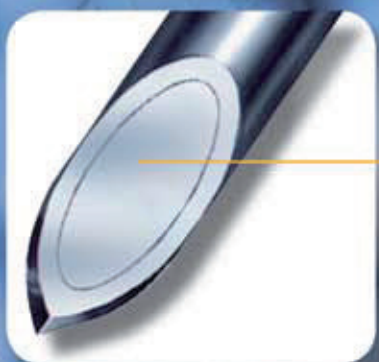

Срез Квинке



Цветовая кодировка хаба

Двойная линза увеличения

Крепеж для интродьюсерной иглы

Сантиметровый маркер

Скользящий ограничитель глубины



**ИГЛА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ БИОПСИИ
ТИП ЧИБА ИЗ ЭХООТРАЖАЮЩЕЙ СТАЛИ**

ECOSHIVA — игла для биопсии тип Чибя, легко видимая на эхографическом мониторе на протяжении всей длины, благодаря специальной стали ECHONOX, из которой она изготовлена.

- ▶ модифицированный срез Квинке (режущая кромка обращена внутрь иглы) облегчает и делает пенетрацию менее инвазивной (эффект раздвижения, а не разрезания тканей).
- ▶ ультратонкие стенки канюли позволяют взять большее количество образца.
- ▶ игла сделана из специального сплава ECHONOX, ясно видимого на эхографическом мониторе
- ▶ легко читаемый сантиметровый маркер и скользящий стопор облегчают контроль за глубиной размещения иглы.
- ▶ прозрачный хаб с двойной линзой увеличения и крепящим зубцом для иглы-интродьюсера.
- ▶ цветовые коды хабов для облегчения определения размера иглы.
- ▶ широкая вариабельность диаметров и длин игл.

Стерильная, одноразового использования.

ДОСТУПНЫЕ
РАЗМЕРЫ

ECOSHIVA®

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	ЦВЕТОВОЙ КОД	КОЛИЧЕСТВО (в упаковке)
18 (1,20)	11 - 15 - 20	розовый	20
20 (0,90)	11 - 15 - 20	желтый	20
21 (0,80)	11 - 15 - 20	зеленый	20
22 (0,70)	11 - 15 - 20	черный	20
25 (0,50)	5 - 7 - 9	оранжевый	20

ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ: ECOSHIVA 20G — 15 см = ECX2015

