

ИГЛА ДЛЯ ЧРЕЗКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЭТАНОЛА

PIA®

PERCUTANEOUS
INJECTION OF ALCOHOL

ECHONOX®

Стilet из эхоотражающей стали позволяет видеть иглу по всей длине на УЗИ мониторе.




Комфортная пластина для пальцевого захвата

Скользящий ограничитель глубины

Хаб с цветовым кодом

Открытый срез Квинке

Закрытый срез Квинке

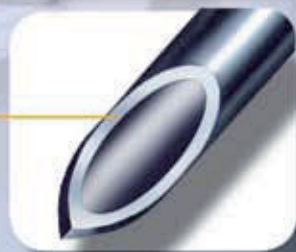

ИГЛА ДЛЯ ЧРЕЗКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЭТАНОЛА

Чрезкожное введение этанола в опухоли печени ведет к некрозам, неоплазии.

- ▶ гомогенное распространение этанола внутри опухоли необходимо для достижения полного некроза: широкие порты по обеим сторонам иглы, следующие за спиральной дорожкой на канюле способствуют лучшему распространению этанола.
- ▶ широкий диапазон размеров позволяет выбрать диаметр иглы (20, 21, 22G), длину иглы (9, 15, 20 см) и длину перфорированного тракта (4, 12, 20 мм).
- ▶ PIA доступна с закрытым (PIA-B) и открытым (PIA-A) концом для капсуляции опухолей.
- ▶ PIA снабжена внутренней заглушкой для придания жесткости игле во время пенетрации и для освобождения иглы от этанола перед ее удалением из опухоли.
- ▶ скользящий ограничитель глубины облегчает точное ее размещение.
- ▶ пластина для комфортного пальцевого захвата и игла с линией соединения шприца.
- ▶ цветовые коды для облегчения определения размеров иглы.

Стерильные, однократного применения.

PIA может выпускаться в модификации PLUS+
PLUS+: игла сделана из стали ECHONOX для оптимального наблюдения за иглой на мониторе.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ **PIA**®

ТИП	РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	ДЛИНА ТРАКТА	КОЛ-ВО (в упак.)
PIA® открытый конец	20 (0,90) 21 (0,80) 22 (0,70)	9 - 15 - 20	4 - 12 - 20 мм	20
PIB® закрытый конец	20 (0,90) 21 (0,80) 22 (0,70)	9 - 15 - 20	4 - 12 - 20 мм	20

ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ:
PIA открытый конец, 20G — 15 см, перфорированный тракт 4мм = PIA201504.
Модификация PLUS+: «PAE» (открытый конец), «PBE» (закрытый конец) + размер

